


AS-MK4



Kochab series / コカブシリーズ

電動昇降ステップ付撮影台

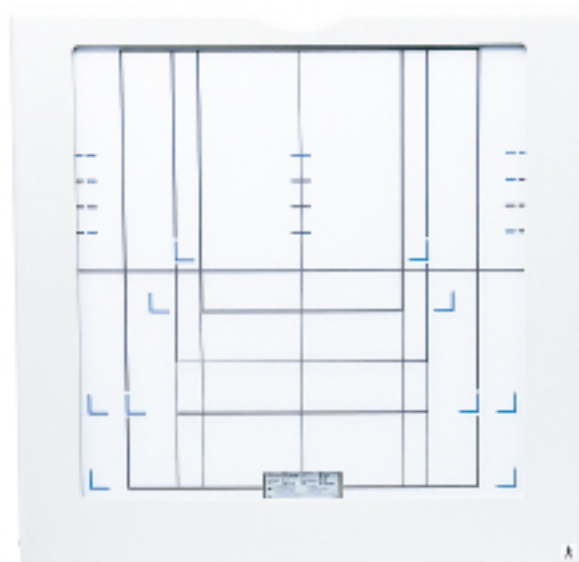

胸部診察分野への導入を目的として開発された電動昇降ステップ付き撮影台で作業効率をUP。

検診バス搭載可能

FUNCTION 01

前開き機構 / グリッド着脱機構

前開き機構により、限られたスペースでのカセットの取り外しが可能になりました。(グリッド着脱機構付き)



FUNCTION 02

昇降用ハンドスイッチ標準装備


本体側面と操作室用に、それぞれ昇降用ハンドスイッチを装備しました。



昇降用
ハンドスイッチ
操作室用ケーブル 12m



受像部中心の高さ選択可能
1250mm / 1300mm / 1350mmから
お選びいただけます。

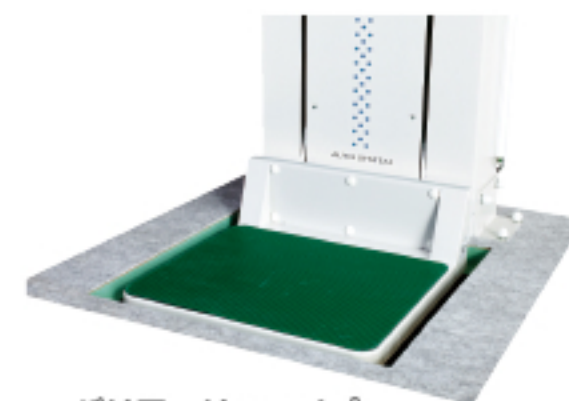

パリアフリータイプ
0~450mm (ステップ上面)


昇降ストローク

- フロアトップタイプ
50mm~490mm
- パリアフリータイプ
0mm~450mm


安全機能

ステップ下部に挟み込みを防止する自動停止機構を搭載しております。

オプション Option

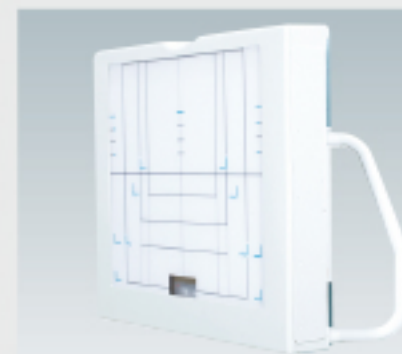

側面グリップ

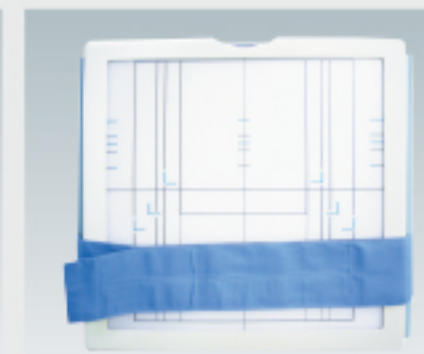

患者固定ベルト

昇降ステップ跳ね上げ(折畳み)機構

各社フォトタイマー対応
お問い合わせください。

壁取付撮影台

AS-MK5

安全にFPDを搭載できます



製品仕様

AS-MK4
2段仕様

受像装置方式	受像部ユニット付(前面パネル、グリッド)
	固定グリッド(フレーム付)着脱方式
グリッド規格	40本/cm、10:1、1.8m(1.5m~2m)
使用可能FPDサイズ	17×17
前面パネル-FPD	密着距離 33mm
受像部高さ位置	1250/1300/1350mm(受像部中心)3段階調整式
電動昇降部	
ステップ移動量	フロアトップタイプ:50~490±5mm
	バリアフリータイプ0~450±5mm
昇降時間	16±1sec/450mmストローク (バリアフリータイプ最大荷重時)
操作	昇降用ハンドスイッチ(押し釦式:UP/DOWN)
昇降ステップ耐荷重	135kg
電源	単相100V±10V、50/60Hz、600VA
外形寸法、質量 (電動昇降部)	W586×D585×H1512~1612mm 約130kg
	(W514×D585×H1050mm 約95kg)
	電源コード12m、アースコード12m
付属品	昇降用ハンドスイッチ本体、操作室用の2組
装置据付	床面:昇降ステップ固定 M8ボルト6本
	壁面:受像部固定 M8ボルト4本
設置・使用環境	使用時気温:5~35℃/未使用時:-20~40℃
	使用時湿度:30~85%R.H.(結露無きこと)
	使用時気圧:700~1060hPa
	要:防水/防塵/防爆/X線防護工事
接地工事	D種接地工事/インピーダンス0.5Ω以下
対電撃保護	クラスI、B形装着部をもつ機器
機器の型式	永久設置形機器

AS-MK4 AS-MK5 オプション	フォトスペーサ	(4/5)	PTF-100L/02(Canon)
	フォトスペーサ	(4/5)	ZP-ICX945(Fujifilm)
	側面グリップ	(4/5)	PA胸部撮影用患者握りグリップ
	患者固定ベルト	(4/5)	マジックベルト式
	14×17用アダプター	(4/5)	FPD14×17搭載時
	昇降ステップ跳ね上げ機構	(4)	折畳み
	ジョイントブラケット	(5)	壁~受像部固定


薬機法	JMDNコード	AS-MK4(Kochab):40655000(汎用X線診断装置用電動式患者台)
		AS-MK5(Kochab):40654000(汎用X線診断装置用非電動式患者台)
	クラス分類	AS-MK4/AS-MK5 クラスI(一般医療機器)
	設置/保守管理	設置管理医療機器 / 特定保守管理医療機器
	品目届出番号	AS-MK4(Kochab):40B2X00006000070
AS-MK5(Kochab):40B2X00006000071		

※仕様・外観は改良の為、変更する場合があります。



製品図面

AS-MK4

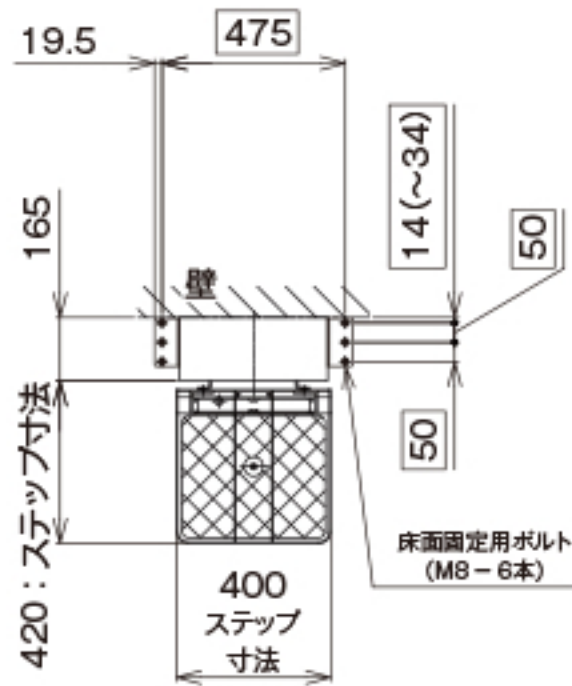

A-A

