

01

多彩なバリエーション


型式の見方

AS-MTF-①②③


① モニター総台数(*1)
② モニター段数(*1)
③ W=2方向レール式
FE=天井固定式

(*1)大画面モニター搭載時、
②③項はMMとなります。


AS-MTF-FEMM

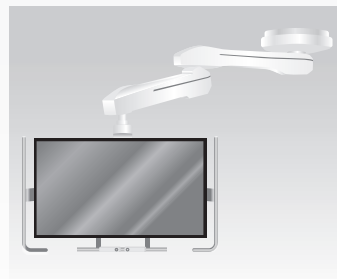


AS-MTF-FE23

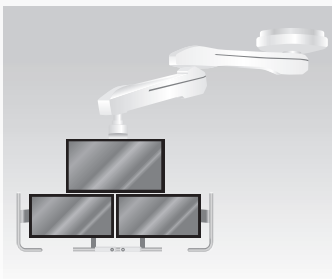


AS-MTF-WMM

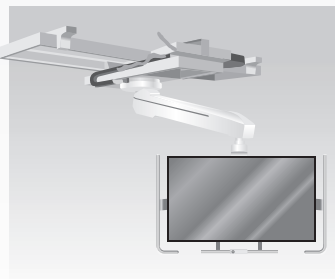


AS-MTF-W24

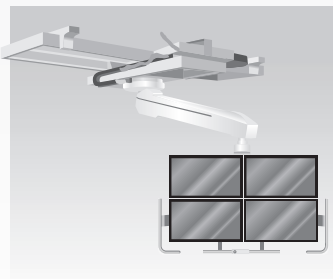

AS-MTF-FEMM+防護板

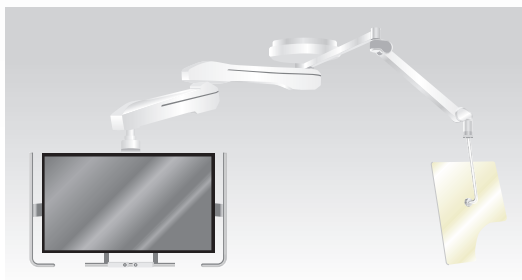

AS-MTF-WMM+防護板

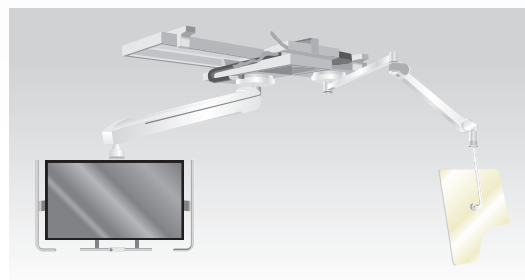

02

基本性能

		AS-MTF50-W	AS-MTF50-FE
基本仕様	方式	2方向レール式	天井固定式
	モニター上下動	500mm	500mm
	モニター旋回	280°	280°
	搭載モニター総質量	50kg未満	50kg未満
	左右動(長手動)	2,100mm	—
	前後動(短手動)	800mm	—
	アーム回転半径	コントロールアーム	1,100mm
		エクステンションアーム	—
	アーム旋回角度	コントロールアーム	330°
		エクステンションアーム	—
標準装備	ケーブル配線処理	アーム内部	アーム内部
	ワンタッチグリップ	○	○
	アクセサリカバー	○	○
	ティルティング機構	○	○
オプション	防護版 組み合わせ	○	○
	ステータスビュー(AS-MTN-SV)	○	○
	ケーブルキャリア(AS-MTN-CC)	○	—
	サイドグリップ(AS-MTN-SG)	○	標準装備
	レール延長	○	—
	インターロックスイッチ	○	—

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
※搭載可能なモニターの寸法・質量・取付条件については、事前にご確認ください。

■ 製造元

AUTO SYSTEM

株式会社 オートシステム

〒819-1306 福岡県糸島市志摩松隈282-5
TEL 092-327-3313 FAX 092-327-2294
医療機器製造販売業許可番号:40B2X00006
(一社)日本画像医療システム工業会(JIRA)会員

東京営業所

〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-12-2 成加パシオン106
TEL 03-6456-1289 FAX 03-6456-1290

大阪サービスセンター

〒538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-16-14
実和コンパクトオフィス E号
TEL 06-6912-3300 FAX 06-6912-3305

<http://www.auto-system.co.jp>



■ 保守契約のご案内

製品を安心してご使用いただけるよう、各種プランをご用意いたしております。詳細はお問い合わせください。

販売代理店

2609



モニター懸垂装置

AUTO SYSTEM

AS-MTF

Trabant Series



Photo Type: AS-MTF-FEMM

モニター懸垂装置

AS-MTF

Trabant Series

軽い操作力で、モニター位置をスムーズに上下調整

AUTO SYSTEM

限られた時間の中でも、スムーズなセッティングを。

オートシステムが長年培ってきたモニター懸垂装置の技術をもとに、操作性をさらに向上させました。

大型化・多面化するモニター環境に対応し、臨床シーンに合わせてモニター位置をスムーズに調整できます。

限られたスペースを有効に活用し、作業しやすい環境づくりを支えます。

天井固定式

AS-MTF-FE

Photo Type: AS-MTF-FEMM

アームを中心にモニター位置を調整する固定式タイプ

AS-MTF-FE紹介動画は
こちらから




レールに沿って左右・前後方向へ移動できるタイプ

2方向レール式

AS-MTF-W

Photo Type: AS-MTF-WMM
Option: ケーブルキャリア

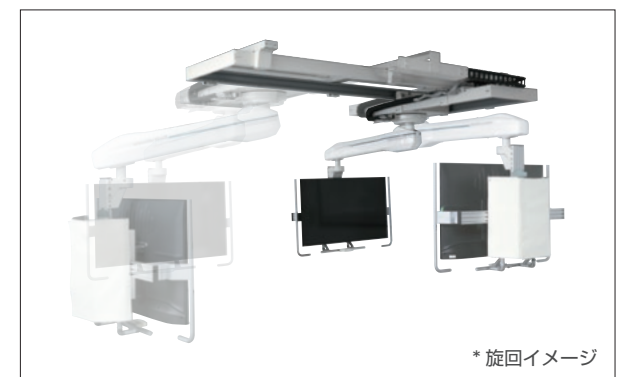

* 旋回イメージ


※写真のモニターは製品に含まれません。
※写真にはオプション品を含みます。

広い可動範囲



広い可動範囲で、目的の位置へスムーズに調整
直径4.2mの範囲で、モニター位置を柔軟に調整できます。アーム旋回330°、モニター旋回280°。

500mm上下ストローク

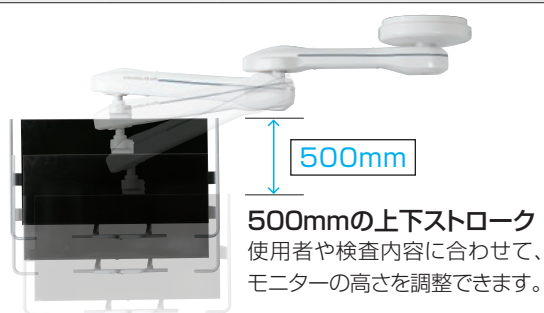

500mmの上下ストローク
使用者や検査内容に合わせて、
モニターの高さを調整できます。

スリムデザイン



医療空間になじむスリムデザイン
圧迫感を抑えた、清潔感のあるデザインです。

ワンタッチ操作



ワンタッチグリップによる簡単操作
グリップのボタンを押してロックを解除し、
モニター位置を調整できます。


防護板組み合わせ対応



防護板との組み合わせに対応
防護板を組み合わせることで、使用環境に応じたセットアップが可能です。
組み合わせ方法や取付条件については、事前にお問い合わせください。

オプション

ステータスビュー(AS-MTF-SV)

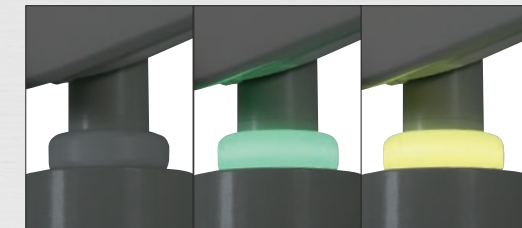

X線システム
電源オフ時 X線システム
電源オン時 X線照射時

X線システムからの信号により
LEDを点灯します。広い視野
角度を持っているので、検査・
治療中にどのポジションから
でも容易に確認できます。

■ X線システム本体との信号形態により
接続できない場合があります。


AS-MTF-W 専用オプション



◎既設ボルト対応
◎移動ベース(キャリッジユニット)追加

◎サイドクリップ (AS-MTF-SG)

モニター側面の操作用グリップ
です。グリップを握って操作する
ことで、モニター回転時の位置
調整を行いやすくします。
※写真は大型モニター仕様です。

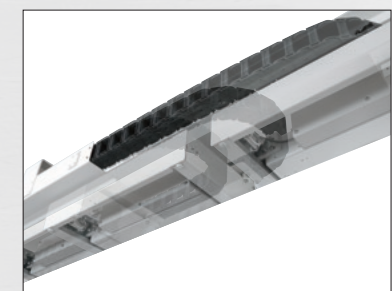

◎ケーブルキャリア
(AS-MTF-CC)
◎レール延長(左右動・前後動)
◎インターロックスイッチ

◎ケーブルキャリア (AS-MTF-CC)

可動部に沿ってケーブルを収納し、
機器の移動に伴うケーブルの
ねじれや引っ張りを軽減します。
標準のカーテン方式に比べ、天
井周辺をすっきり見せます。